

Silk Nx

Bedienungsanleitung



Inhaltsverzeichnis

Willkommen	4
<hr/>	
Ihre Hörsysteme	5
<hr/>	
Art der Hörsysteme	5
Lernen Sie Ihre Hörsysteme kennen	5
Bestandteile und Namen	6
Hörprogramme	7
Einstellungen	7
Batterien	8
<hr/>	
Batteriegröße und Tipps zur Handhabung	8
Batterien auswechseln	9
Täglicher Einsatz	10
<hr/>	
Ein- und ausschalten	10
Hörsysteme einsetzen und herausnehmen	11
Lautstärke einstellen	14
Hörprogramm wechseln	14
Besondere Hörsituationen	15
<hr/>	
Telefonieren	15
Wartung und Pflege	16
<hr/>	
Hörsysteme	16
Ohrstücke	17
Professionelle Wartung	20

Weitere Informationen	21
Sicherheitshinweise	21
Zubehör	21
Symbole in diesem Dokument	21
Problembehandlung	22
Landesspezifische Information	24
Service und Garantie	27

Willkommen

Danke, dass Sie sich für unsere Hörsysteme entschieden haben. Wie bei allen neuen Geräten kann es ein wenig dauern, bis Sie mit den Hörsystemen vertraut sind.

Mit Hilfe dieser Anleitung und der Unterstützung Ihres Hörgeräteakustikers werden Sie die Vorzüge und die höhere Lebensqualität zu schätzen wissen, die Ihnen Ihre Hörsysteme bieten.

Damit Sie den größten Nutzen aus Ihren Hörsystemen ziehen können, wird empfohlen, dass Sie die Hörsysteme täglich und den ganzen Tag über tragen. Dies hilft Ihnen dabei, sich an Ihre neuen Hörsysteme zu gewöhnen.



VORSICHT

Es ist wichtig, dass Sie diese Bedienungsanleitung und das Sicherheitshandbuch sorgfältig und vollständig lesen. Befolgen Sie die Sicherheitshinweise, um Sachschäden oder Verletzungen zu vermeiden.

Ihre Hörsysteme



Diese Bedienungsanleitung beschreibt optionale Funktionen, die Ihre Hörsysteme möglicherweise nicht alle haben.

Bitte Sie Ihren Hörgeräteakustiker, die Funktionen Ihrer Hörsysteme zu markieren.

Art der Hörsysteme

Ihre Hörsysteme werden im Gehörgang getragen. Die Hörsysteme sind nicht für Kinder unter 3 Jahren bestimmt und nicht für Personen, deren Entwicklungsalter unter 3 Jahren liegt.

Die drahtlose Funktionalität ermöglicht fortschrittliche audiologische Funktionen und die Synchronisierung Ihrer beiden Hörsysteme.


Lernen Sie Ihre Hörsysteme kennen

Ihre Hörsysteme haben keine Bedienelemente.



Fragen Sie Ihren Hörgeräteakustiker, ob die Verwendung einer Smartphone App als Fernbedienung möglich ist.

Bestandteile und Namen

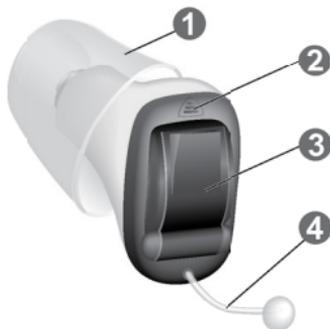

- ① Ohrstück (Click Sleeve)
 - ② Mikrofonöffnung
 - ③ Batteriefach
(Ein-/Ausshalter)
 - ④ Rückholfaden
-

Sie können die folgenden Standard-Ohrstücke verwenden:

Standard-Ohrstücke

Größe

<input type="radio"/>		Click Sleeve (belüftet oder geschlossen)
<input type="radio"/>		Einfacher Click Dome™ (offen oder geschlossen)
<input type="radio"/>		Lamellen Click Dome
<input type="radio"/>		Doppelter Click Dome

Standard-Ohrstücke können Sie leicht auswechseln. Lesen Sie mehr im Kapitel "Wartung und Pflege".

Hörprogramme

1

2

3

4

5

6

Lesen Sie mehr im Kapitel "Hörprogramm wechseln".

Einstellungen

- Mit aktivierter **Einschaltverzögerung** können Sie die Hörsysteme ohne unangenehmes Pfeifgeräusch einsetzen.
Lesen Sie mehr im Kapitel "Ein- und ausschalten".

- Die **Tinnitus-Therapie-Funktion** erzeugt ein Geräusch, um Sie von Ihrem Tinnitus abzulenken.

Batterien

Wenn die Batterie schwach ist, wird das Hörsystem leiser oder ein Warnsignal ertönt. Es hängt vom Batterietyp ab, wie viel Zeit Sie haben, um die Batterie zu wechseln.

Batteriegröße und Tipps zur Handhabung

Fragen Sie Ihren Hörgeräteakustiker nach geeigneten Batterien.


Batteriegröße:	10
----------------	----

- Verwenden Sie immer die richtige Batteriegröße für Ihre Hörsysteme.
- Wenn Sie vorhaben, die Hörsysteme mehrere Tage nicht zu nutzen, entnehmen Sie die Batterien.
- Tragen Sie immer Ersatzbatterien bei sich.
- Entnehmen Sie leere Batterien unverzüglich und befolgen Sie die lokalen Vorschriften zur Batterieentsorgung.

Batterien auswechseln


Batterie entnehmen:

- ▶ Öffnen Sie das Batteriefach.
- ▶ Entnehmen Sie die Batterie mit der Hand.

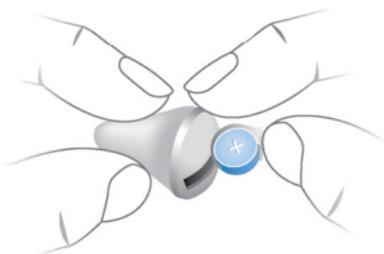

Batterie einsetzen:

- ▶ Wenn die Batterie eine Schutzfolie hat, entfernen Sie die Schutzfolie kurz bevor Sie die Batterie einsetzen wollen.
- ▶ Legen Sie die Batterie so ein, dass das "+" Symbol nach oben zeigt.

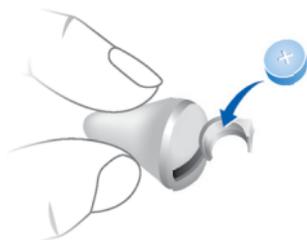

- ▶ Schließen Sie das Batteriefach vorsichtig. Wenn Sie dabei einen Widerstand spüren, ist die Batterie nicht richtig eingelegt.

Versuchen Sie nicht, das Batteriefach mit Gewalt zu schließen. Es kann dadurch beschädigt werden.

Täglicher Einsatz

Ein- und ausschalten

Sie haben folgende Möglichkeiten, um die Hörsysteme ein- oder auszuschalten.

Mit dem Batteriefach:

- ▶ Einschalten: Schließen Sie das Batteriefach.
Standard-Lautstärke und -Hörprogramm sind eingestellt.
- ▶ Ausschalten: Öffnen Sie das Batteriefach vollständig.

Beim Ein- oder Ausschalten kann auf Wunsch ein Signal ertönen. Sie hören das Signal nur, wenn Sie die Hörsysteme tragen.

Wenn die **Einschaltverzögerung** aktiviert ist, schalten sich die Hörsysteme erst nach einigen Sekunden ein. In dieser Zeit können Sie die Hörsysteme ohne unangenehmes Pfeifgeräusch in Ihre Ohren einsetzen.

Die Einschaltverzögerung kann von Ihrem Hörgeräteakustiker aktiviert werden.

Hörsysteme einsetzen und herausnehmen



VORSICHT

Verletzungsgefahr!

- ▶ Tragen Sie das Hörsystem immer mit einem Ohrstück.
- ▶ Stellen Sie sicher, dass das Ohrstück vollständig am Hörsystem befestigt ist.

Hörsystem einsetzen:

- ▶ Stellen Sie fest, welches das rechte und welches das linke Hörsystem ist, damit Sie es in das richtige Ohr einsetzen. An der Farbe des Gerätes oder an der Beschriftung erkennen Sie, für welches Ohr das Hörsystem angepasst wurde:

rote Farbe, aufgedrucktes "R" = rechtes Ohr

blaue Farbe, aufgedrucktes "L" = linkes Ohr

- ▶ Achten Sie darauf, dass die Lasche des Click Sleeve und die Linie auf dem Gerät zusammenpassen.


richtig



falsch




- ▶ Halten Sie das Hörsystem richtig, bevor Sie es einsetzen: Achten Sie darauf, dass sich der Rückholfaden im unteren Bereich befindet. Der Pfeil, der auf dem Hörsystem aufgedruckt ist, muss nach oben zeigen.

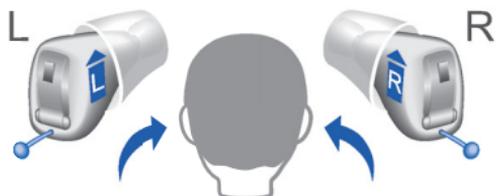

- ▶ Schieben Sie das Hörsystem vorsichtig in den Gehörgang.
- ▶ Drehen Sie es leicht, bis es gut sitzt.

Öffnen und schließen Sie Ihren Mund, um Luftschlüsse im Gehörgang zu vermeiden.

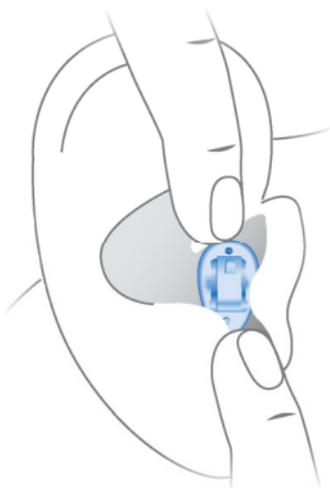

VORSICHT

Verletzungsgefahr!

- ▶ Setzen Sie das Hörsystem vorsichtig und nicht zu tief in das Ohr ein.



- Es kann hilfreich sein, das **rechte** Hörsystem mit der **rechten** Hand und das **linke** Hörsystem mit der **linken** Hand einzusetzen.
- Wenn Ihnen das Einsetzen des Hörsystems schwer fällt, ziehen Sie das Ohrläppchen vorsichtig mit der anderen Hand nach unten. Dadurch wird der Gehörgang geöffnet und das Hörsystem lässt sich leichter einsetzen.

Hörsystem herausnehmen:



HINWEIS

Ziehen Sie niemals an der Batteriefachklappe, um das Hörsystem zu entfernen. Ihr Hörsystem kann hierdurch beschädigt werden.

- ▶ Drücken Sie leicht an die Rückseite Ihres Ohres, um das Hörsystem im Gehörgang zu lösen.
- ▶ Ziehen Sie den Rückhofaden Richtung Hinterkopf, um das Hörsystem herauszunehmen.



VORSICHT

Verletzungsgefahr!

- ▶ In sehr seltenen Fällen kann es vorkommen, dass das Ohrstück im Ohr verbleibt, wenn Sie das Hörsystem entnehmen. Lassen Sie das Ohrstück in diesem Fall von einer medizinischen Fachkraft entfernen.

Reinigen und trocknen Sie Ihre Hörsysteme nach dem Tragen. Lesen Sie mehr im Kapitel "Wartung und Pflege".

Lautstärke einstellen

Ihre Hörsysteme passen die Lautstärke automatisch an die Hörsituation an.

- ▶ Wenn Sie die Lautstärke lieber manuell einstellen, verwenden Sie eine Fernbedienung.

Auf Wunsch kann ein Signal bei Veränderung der Lautstärke ertönen.

Hörprogramm wechseln

Ihre Hörsysteme passen den Klangcharakter automatisch an die jeweilige Hörsituation an.

Ihre Hörsysteme können auch mehrere Hörprogramme haben. Mit Hilfe der Hörprogramme verändern Sie den Klangcharakter bei Bedarf selbst. Auf Wunsch kann ein Signal beim Wechsel des Hörprogramms ertönen.

- ▶ Um das Hörprogramm zu wechseln, verwenden Sie eine Fernbedienung.

Im Kapitel "Hörprogramme" finden Sie eine Liste Ihrer Hörprogramme.

Besondere Hörsituationen

Telefonieren

Beim Telefonieren drehen Sie den Telefonhörer etwas, so dass das Ohr nicht vollständig vom Telefonhörer verdeckt wird.



Telefonprogramm

Wenn Sie beim Telefonieren eine bestimmte Lautstärkeeinstellung bevorzugen, bitten Sie Ihren Hörgeräteakustiker, ein spezielles Telefonprogramm einzurichten.

- ▶ Wechseln Sie in das Telefonprogramm, wenn Sie telefonieren.

Wenn für Ihre Hörsysteme ein Telefonprogramm eingerichtet wurde, ist dies im Kapitel "Hörprogramme" angegeben.

Wartung und Pflege

Um Schäden zu vermeiden ist es wichtig, dass Sie Ihre Hörsysteme pfleglich behandeln und einige Grundregeln beachten, die sicher bald zur täglichen Gewohnheit werden.

Hörsysteme

Trocknen und Aufbewahren

- ▶ Trocknen Sie Ihre Hörsysteme über Nacht.
- ▶ Wenn Sie die Hörsysteme längere Zeit nicht tragen, lagern Sie diese mit geöffnetem Batteriefach und ohne eingelegte Batterien in einer trockenen Umgebung.
- ▶ Fragen Sie Ihren Hörgeräteakustiker nach weiteren Informationen.

Reinigen

Aus hygienischen Gründen und um die Leistungsfähigkeit Ihrer Hörsysteme zu erhalten, reinigen Sie Ihre Hörsysteme täglich.

- ▶ Reinigen Sie Ihre Hörsysteme täglich mit einem weichen, trockenen Tuch.
- ▶ Verwenden Sie nie fließendes Wasser und tauchen Sie die Geräte nicht in Wasser.
- ▶ Üben Sie beim Reinigen niemals Druck aus.



- ▶ Fragen Sie Ihren Hörgeräteakustiker nach Reinigungsmitteln, Pflegezubehör und weiteren Informationen, um Ihre Hörsysteme in gutem Zustand zu halten.


Ohrstücke

Reinigen

Auf den Ohrstücken kann sich Cerumen (Ohrenschmalz) ansammeln. Dadurch kann die Klangqualität beeinträchtigt werden. Reinigen Sie die Ohrstücke täglich.

- ▶ Reinigen Sie das Ohrstück gleich nach dem Herausnehmen mit einem weichen, trockenen Tuch.

Das verhindert, dass das Cerumen trocken und hart wird.

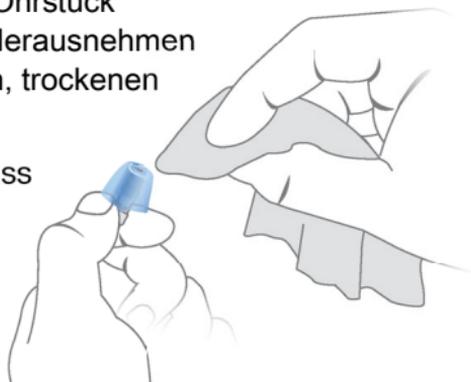

- ▶ Drücken Sie die Spitze des Ohrstücks zusammen.




Auswechseln

Wechseln Sie Standard-Ohrstücke etwa alle drei Monate aus. Ersetzen Sie sie bereits früher, sobald Sie Risse oder andere Veränderungen feststellen. Wie Sie dabei vorgehen, hängt vom Typ des Ohrstückes ab. Im Kapitel "Bestandteile und Namen" hat Ihr Hörgeräteakustiker Ihren Ohrstücktyp markiert.

Click Sleeves auswechseln

- ▶ Ziehen Sie das Click Sleeve mit Ihren Fingern ab. Wenn Sie es nicht abziehen können, stülpen Sie es zuerst um und ziehen Sie es dann ab.

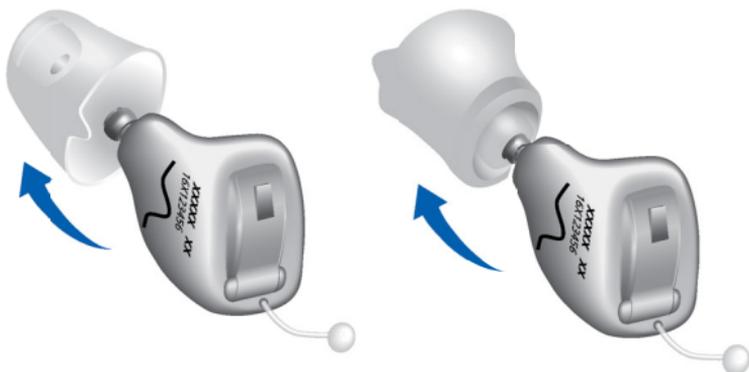

- ▶ Achten Sie besonders darauf, dass das neue Click Sleeve spürbar einrastet.



- ▶ Achten Sie beim Anbringen des neuen Click Sleeve darauf, dass die Lasche des Click Sleeve und die Linie auf dem Gerät zusammenpassen.

richtig




falsch



Click Domes auswechseln

Wenn es Ihnen schwer fällt, den alten Click Dome zu entfernen, verwenden Sie das Demontagewerkzeug oder befolgen Sie die Anweisungen auf der Verpackung des Click Domes:

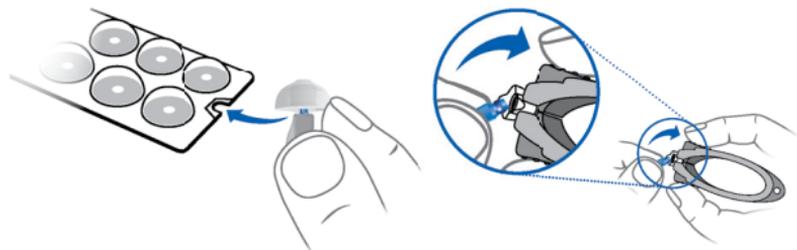

Das Demontagewerkzeug ist als Zubehör erhältlich.

- ▶ Achten Sie besonders darauf, dass der neue Click Dome spürbar einrastet.



Professionelle Wartung

Ihr Hörgeräteakustiker kann Ihre Hörsysteme gründlich und professionell reinigen und warten.

Fragen Sie Ihren Hörgeräteakustiker, welche Wartungsabstände für Sie empfehlenswert sind.

Weitere Informationen

Sicherheitshinweise

Weitere Sicherheitshinweise finden Sie im Sicherheitshandbuch, das im Lieferumfang enthalten ist.

Zubehör

Welches Zubehör erhältlich ist, hängt vom Typ des Hörsystems ab. Beispiele sind eine Fernbedienung, ein Audiostreaming-Gerät oder eine Smartphone App als Fernbedienung.

Manche Hörsysteme unterstützen CROS- und BiCROS-Lösungen für einseitig Gehörlose.

Für weitere Informationen wenden Sie sich an Ihren Hörgeräteakustiker.

Symbole in diesem Dokument



Deutet auf eine Situation hin, die zu ernsthaften, mäßigen oder geringfügigen Verletzungen führen kann.



Deutet auf mögliche Sachschäden hin.



Anleitungen und Tipps, wie Sie Ihre Hörsysteme besser und effektiver nutzen.

Problembehandlung

Problem und Lösungsmöglichkeiten

Der Ton ist schwach.

- Schließen Sie das Batteriefach vorsichtig und vollständig.
 - Reinigen Sie das Hörsystem.
 - Wechseln Sie die leere Batterie aus.
 - Reinigen Sie das Ohrstück oder wechseln Sie es aus.
-

Pfeifender Ton ertönt aus dem Hörsystem.

- Setzen Sie das Hörsystem erneut ein, bis es richtig sitzt.
 - Reinigen Sie das Ohrstück oder wechseln Sie es aus.
-

Der Ton ist verzerrt.

- Wechseln Sie die leere Batterie aus.
 - Reinigen Sie das Ohrstück oder wechseln Sie es aus.
-

Aus dem Hörsystem ertönen Signaltöne.

- Wechseln Sie die leere Batterie aus.
-

Problem und Lösungsmöglichkeiten

Das Hörsystem funktioniert nicht.

- Schalten Sie das Hörsystem ein.
 - Schließen Sie das Batteriefach vorsichtig und vollständig.
 - Wechseln Sie die leere Batterie aus.
 - Überprüfen Sie, ob die Batterie richtig eingelegt wurde.
 - Die Einschaltverzögerung ist aktiviert. Warten Sie einige Sekunden und prüfen Sie erneut.
-

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich an Ihren Hörgeräteakustiker.

Landesspezifische Information

USA und Kanada

Information zur Zertifizierung der Hörsysteme mit drahtloser Funktionalität:

Silk Nx

- Enthält FCC ID: SGI-MIM001
- IC: 267AB-WP4N2

Service und Garantie

Seriennummern

Links:

Rechts:

Service-Termine

1: 4:

2: 5:

3: 6:

Garantie

Kaufdatum:

Garantiedauer in Monaten:

Ihr Hörgeräteakustiker



Hersteller

Signia GmbH

Henri-Dunant-Strasse 100

91058 Erlangen

Deutschland

Tel.: +49 9131 308 0

Document No. 03529-99T01 DE

Order/Item No. 109 556 33

Master Rev01, 02.2018

© 03.2018, Signia GmbH. All rights reserved



www.signia-hearing.com